

matsuda®

Be healthy.

MEDICAL FACE MASKS (SURGICAL) TYPE IIR

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ) ΤΥΠΟΥ IIR

 50 pcs

TYPE IIR
SPLASH RESISTANT

BFE ≥
98%



3ply, Type IIR,
BFE ≥ 98%




Easy breath
Άνετη αναπνοή



Adjustable nose piece
Επιρρίνιο έλασμα




Elastic ear loops
Λάστιχο που δεν κουράζει

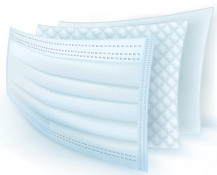

3 ply



Με earloops

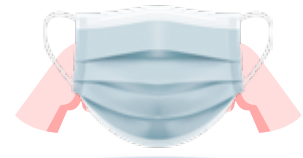

Πλαστικοποιημένο
Μεταλλικό έλασμα

Μάσκες μιας χρήσης, 3ply, BFE ≥ 98% • Με ελαστικά earloops και ρυθμιζόμενο επιρρίνιο έλασμα • Χρήση από ασθενείς και άλλα άτομα για τη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης λοιμώξεων ιδιαίτερα σε καταστάσεις επιδημίας ή πανδημίας • Μάσκα Τύπου IIR σύμφωνα με το EN 14683:2019+AC:2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ

1. Κρατήστε τη μάσκα μπροστά από το στόμα και τη μύτη με τέτοιο τρόπο ώστε τα λάστιχα να κρέμονται αριστερά και δεξιά της μάσκας.
2. Τοποθετήστε τη μάσκα πάνω από τη μύτη και το στόμα σας έτσι ώστε το έλασμα να πατάει στο πάνω μέρος της μύτης σας και περάστε τα λάστιχα πίσω από τα αυτιά σας. Η ανοιχτόχρωμη πλευρά να βρίσκεται εσωτερικά.
3. Εφαρμόστε προσεκτικά το έλασμα στη μύτη σας και ρυθμίστε τη μάσκα έτσι ώστε να επιτευχθεί μια σφικτή εφαρμογή στο πρόσωπό σας.



1.



2.



3.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγεθος

17,5cm x 9,5cm

Ιατροτεχνολογικό είδος



Επιρρίνιο έλασμα



5 120505 6141906 5

Κωδικός 041906
Συσκευασία 50τμχ